



Dr-Kim

## LED-Stirnleuchte



a bess group company

für Ambulanz und OP

bess medizintechnik gmbh

## Persönlich. Kompetent. Verlässlich.

Seit 1988 ist bess Ihr kompetenter Partner in den Bereichen HNO und Kopf-Hals-Chirurgie.

Mit unserem Team qualifizierter Medizinprodukteberater sind wir Ansprechpartner für unsere Kunden in Klinik und Praxis. Ob bei Ihnen vor Ort oder auf über 50 Veranstaltungen im Jahr – wir sind in ständigem Dialog mit den Experten.

Unser Fokus liegt auf dem Patientenwohl. Wir bieten Produkte an, die wir uneingeschränkt auch unserer Familie empfehlen würden. Das ist unser Qualitätsanspruch.



Firmensitz Berlin

Von Anfang an sind wir ein inhaber-geführtes Familienunternehmen.

Unsere internationale Vernetzung ermöglicht es uns, Synergien und Impulse auch aus anderen medizinischen Disziplinen zu nutzen und Entwicklungen mit unserem Team von Ingenieuren zu realisieren.

Als Vertrieb sind wir Schnittstelle zwischen Kunde und Hersteller. Wir sichern den Informationsfluss, liefern schnell und zuverlässig und stehen unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

Persönlich. Kompetent. Verlässlich.




**bess.** Beratung, die keine Fragen offen lässt.



Dr-Kim

Der südkoreanische Arzt **Dr. Gitchun Kim** hat sich zunächst über 12 Jahre lang der Patientenversorgung gewidmet, bevor er sich verstärkt seinem zweiten, dem Ingenieurberuf zuwandte.

Die **Dr. Kim LED-Stirnleuchte** ist das Produkt seiner Expertise aus beiden Bereichen.

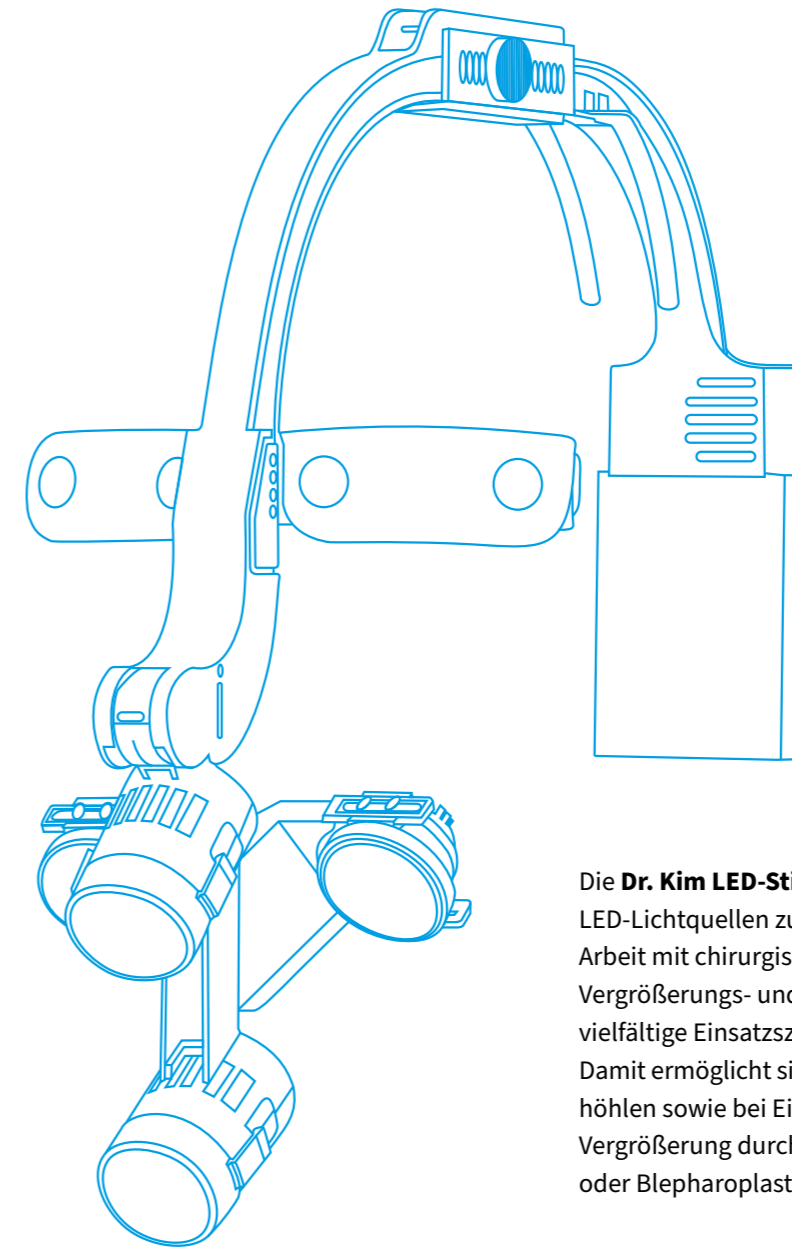

Die **Dr. Kim LED-Stirnleuchte** verfügt über zwei LED-Lichtquellen zur Schattenreduktion bei der Arbeit mit chirurgischen Instrumenten sowie Vergrößerungs- und Dokumentations-Optionen für vielfältige Einsatzszenarien.

Damit ermöglicht sie verbesserte Einsicht in Körperhöhlen sowie bei Eingriffen, die mit moderater Vergrößerung durchgeführt werden (z.B. Rhino- oder Blepharoplastiken).

# LED-Stirnleuchte Dr. Kim

- schattenarm durch Doppel-LED
- stufenlos verstellbare Leuchtkraft

- bis zu 12 Stunden Arbeiten mit einer Akkuladung
- geringes Gewicht (104 g) für ermüdungsarmes Arbeiten
- vielseitig verwendbar durch Vergrößerungsoptionen
- einfach adaptierbare HD-Kameras
- verschiedene Farbtemperaturen über Filter einstellbar
- optional mit Sensor für berührungsloses Ein- und Ausschalten (DKH-50S)



## Erweiterungsoptionen

### HD-Kameras



#### DCAM-3

- kabellose (WLAN, 720p) oder kabelgebundene (HDMI, 1080p) Signalübertragung
- Foto- und/oder Videoaufzeichnung
- Steuerung auch mittels App (Android, iOS)

#### DCAM-4

- kabellose Signalübertragung (Wireless HDMI, 1080p)
- Foto- und/oder Videoaufzeichnung
- Steuerung mittels Fernbedienung

### Lupenbrillen



#### DKT-3

- 2,5-fache Vergrößerung
- Gewicht: 34 g
- Schärfbereich 25 bis 100 cm
- Pupillendistanz einstellbar: 56 bis 72 mm



#### DKT-4

- 4-fache Vergrößerung
- Gewicht: 39 g
- Schärfbereich 25 bis 100 cm
- Pupillendistanz einstellbar: 56 bis 72 mm

## Vergrößerungsaufsatz

### DKL-5

- 1,5-fache Vergrößerung
- Gewicht: 16 g

### Gläser-Optionen

Pupillen- distanz →	58 mm	62 mm	66 mm	70 mm
Dioptrien ↓				
1,5	DKL-5-58-1,5	DKL-5-62-1,5	DKL-5-66-1,5	DKL-5-70-1,5
2,0	DKL-5-58-2,0	DKL-5-62-2,0	DKL-5-66-2,0	DKL-5-70-2,0
2,5	DKL-5-58-2,5	DKL-5-62-2,5	DKL-5-66-2,5	DKL-5-70-2,5
3,0	DKL-5-58-3,0	DKL-5-62-3,0	DKL-5-66-3,0	DKL-5-70-3,0

geringerer Dioptrienwert = entfernterer Fokusbereich



## Schutzvisier

### DKPF

- verbesserte Hygiene in Ambulanz und OP
- mit Halterung zur einfachen Anbringung an Stirnleuchten DKH-50 und DKH-50S



## Artikelübersicht


REF	Artikel
DKH-50	<b>Stirnleuchte mit Doppel-LED</b> Set mit zwei Akkus, Ladegerät und drei Paar Farbfiltern
DKH-50S	<b>Stirnleuchte mit Doppel-LED und Bewegungssensor</b> Set mit zwei Akkus, Ladegerät und drei Paar Farbfiltern
DKL-5	Vergrößerungsaufsatz (1,5-fach)
DKT-3	Lupenbrille (2,5-fach)
DKT-4	Lupenbrille (4-fach)
DKPF	Schutzvisier - 5 St. mit Halterung zur Anbringung an DKH-50 + 50S
DCAM-3	HD-Kamera mit kabelgebundener (HDMI) oder kabelloser (WLAN) Signalübertragung
DCAM-4	HD-Kamera zur kabellosen (Wireless HDMI) Signalübertragung

### Starter-Sets

DKH-50-Set	<b>Stirnleuchte mit Doppel-LED</b> mit zwei Akkus, Ladegerät und drei Paar Farbfiltern <b>im Set mit 1 Stk. DKL-5 und Transportbox (DKTB)</b>
DKH-50S-Set	<b>Stirnleuchte mit Doppel-LED und Bewegungssensor</b> mit zwei Akkus, Ladegerät und drei Paar Farbfiltern <b>im Set mit 1 Stk. DKL-5 und Transportbox (DKTB)</b>



Die Produkte in diesem Katalog sind €-gekennzeichnet.

 Dr. Kim Co. — Republik Korea



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen für unsere Produkte; ausschließlich diese sind maßgeblich. Der Abdruck von Hinweisen zur Anwendung der Produkte in diesem Katalog dient lediglich der Verständlichkeit und gibt den Stand der Drucklegung wieder.

Fordern Sie im Bedarfsfall eine aktuelle Version an!

WEEE-Registriernummer: DE69310906



Dr-Kim

## LED-Stirnleuchte für Ambulanz und OP



BMG-MR-PCA-80845-DrKim\_DE Rev.: 2



a bess group company

### **bess medizintechnik gmbh**

**Deutschland:** Gustav-Krone-Str. 7 • D-14167 Berlin  
Tel.: 030 / 816 909-0 • Fax: 030 / 816 909-16

**Österreich:** Kaiser-Josef-Platz 41 • A-4601 Wels  
Tel.: 07248 / 66 1 44 • Fax: 07248 / 62205

[www.bess.eu](http://www.bess.eu) • [office@bess.eu](mailto:office@bess.eu)